


6. 組込型製品

弊社は、創業当初より、主に分析機器大手メーカーへのOEM供給を中心とした製品開発及び製造を行っております。昨今、フロー合成など研究や製造における高精度送液が要求される場面で、その安定した送液性能に高評価をいただいております。

製品開発コンセプトに「高性能・小型・低価格」を掲げ、さらに「扱いやすさや壊れにくさ」にこだわった送液デバイス部品を取り揃えております。

RS232C通信 / RS485通信接続イメージ

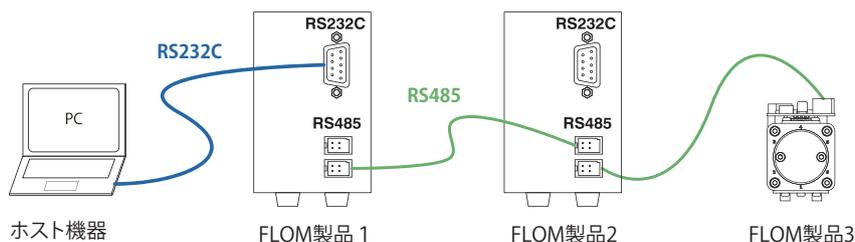

組込型製品では、開示するコマンドをプログラムしていただき、RS232C通信を介して接続することで外部制御を行えます。


複数の製品の接続時は、専用のRS485通信を用いて、シンプルな配線が可能となっております。

※アナログ信号を用いたリモート接続にも対応しております。

【組込型】リニア駆動脈流制御送液ポンプ Intelligent Pump UI-32 Series



■参考寸法図

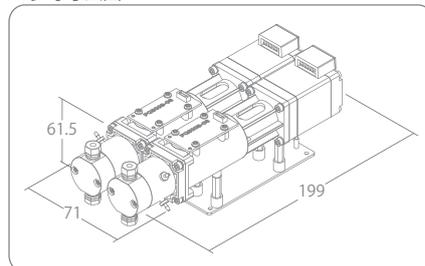

製品仕様	
型式	UI-32A
ヘッド材質	SUS, PEEK より選択可
設定流量範囲	0.001 ~ 9.999 mL/min または 0.01 ~ 99.99 mL/min より選択可
外部入出力信号	入力: START / STOP 出力: ERROR / FUNC (READY / END / RUN のいずれかを割り当て) DC1-5V 入力: 流量設定, DC1-5V 出力: 圧力モニター
通信	RS232C, RS485 (フロムデバイスネットワーク)
電源仕様	DC 24 V, MAX 50 W

* 弊社標準製品は、P4ページをご参照ください。